

SISTEMA ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADO



SISTEMA DE PROTESIS TOTAL DE CADERA MODULAR



DISPOSITIVOS
MÉDICOS

RI-13485-35



RECOGNIZED
CERTIFICATION



Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica

IRAM ISO 13485:2019

www.cdh-protesis.com.ar



•Mayor Estabilidad:

El diseño de doble movilidad incorpora dos puntos de articulación: uno interno entre la cabeza modular del tallo femoral y el inserto de UHMWPE, y otro externo entre el inserto y el revestimiento metálico pulido espejo de CrCo de Linner Metalico. Esta combinación reduce significativamente el riesgo de luxación en comparación con prótesis convencionales.




•Versatilidad Quirúrgica: La Cúpula No Cementada de Doble Movilidad solo necesita de los componentes de prueba para su colocación, permitiendo la utilización del instrumental acetabular previo.

El Revestimiento de Titanio Trabecular, sumado a los tres orificios de fijación primaria con tornillos de titanio, aseguran una osteointegración eficiente.



Rango de Movimiento:

- . El movimiento primario ocurre en el componente rotacional interno.
- . El componente rotacional externo se activa en rangos extremos de movimiento, ayudando a minimizar el desgaste, reducir el torque de fricción y aumentar la estabilidad.
- . El rango de movimiento promedio máximo puede alcanzar 165 grados.

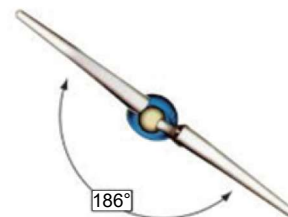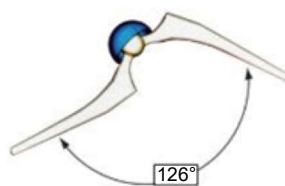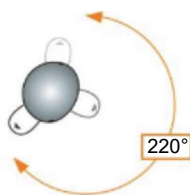

Componentes del Sistema:



Cúpula No Cementada Titanio



Linner Metálico CrCoMb



Linner UHMWPE Cross Link

Rangos de Compatibilidad de Cúpulas No Cementadas Vs. Cabezas Modulares

DIAM. CUPULA DOBLE MOVILIDAD	CABEZA MODULAR
46 mm	22 mm
48 mm	
50 mm	
52 mm	
54 mm	28 mm
56 mm	
58 mm	
60 mm	
62 mm	

Cúpulas y Cabezas Modulares

CUPULAS ACETABULARES DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADAS	
CODIGO	DESCRIPCION
581-3113-06-46-D	CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA Ø46 mm
581-3113-06-48-D	CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA Ø48 mm
581-3113-06-50-D	CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA Ø50 mm
581-3113-06-52-D	CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA Ø52 mm
581-3113-06-54-D	CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA Ø54 mm
581-3113-06-56-D	CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA Ø56 mm
581-3113-06-58-D	CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA Ø58 mm
581-3113-06-60-D	CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA Ø60 mm
581-3113-06-62-D	CUPULA ACETAB. DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA Ø62 mm

CABEZAS MODULARES 22 mm	
CODIGO	DESCRIPCION
581-3210-0022/0	CABEZA MODULAR Ø22 / 0 mm
581-3210-0022/+3	CABEZA MODULAR Ø22 / +3 mm
581-3210-0022/+6	CABEZA MODULAR Ø22 / +6 mm
CABEZAS MODULARES 28 mm	
CODIGO	DESCRIPCION
581-3210-0028/-3	CABEZA MODULAR Ø28 / -3 mm
581-3210-0028/-6	CABEZA MODULAR Ø28 / -6 mm
581-3210-0028/0	CABEZA MODULAR Ø28 / 0 mm
581-3210-0028/+3	CABEZA MODULAR Ø28 / +3 mm
581-3210-0028/+6	CABEZA MODULAR Ø28 / +6 mm

Presentación

Envase Individual Esterilizado
por Radiación Gamma



STERILE

R

